



Fever is a common symptom of COVID-19 and influenza. Practicing regular temperature taking will help keep our community healthy!

If you received a free Kinsa thermometer, please remember to set it up. To help you get started, we've provided a quick guide below.

QUICKCARE



KINSA APP

## How to set up your Kinsa thermometer



### STEP 1

#### Download the app

Search for "Kinsa" in your app store

Available in the App Store and Google Play!



#### Or scan this QR Code

Point your smartphone's camera at the QR code to the right, and tap the link that appears.



### STEP 2

#### Launch the app

Once you've downloaded the Kinsa app, launch it to get started.



### STEP 3

#### Connect thermometer to Kinsa app

Tap the setting gear  at the top right corner of your screen, and then tap **Add new thermometer**.

Follow the instructions on your screen to connect your thermometer via  Bluetooth.



La fiebre es un síntoma muy común de COVID-19 y La Influenza. ¡Practicando la toma regular de temperatura ayudará a mantener una comunidad sana!

Si recibió un termómetro de Kinsa gratis, recuerde configurarlo. Para comenzar, a continuación le ofrecemos una guía rápida.



## Cómo configurar su termómetro



### PASO 1

#### Descargar el app


Buscar la aplicación de "Kinsa" en la app store

Disponible en App Store y Google Play!



#### O escanear el Código QR

Apunta con tu cámara hacia el código QR a la derecha y luego abre el link que aparece.

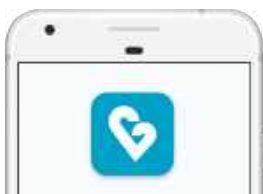

### PASO 2


#### Inicia la aplicación


Una vez que haya descargado la aplicación de Kinsa, iníciela para comenzar.



### PASO 3

#### Conecte el termómetro a la aplicación de Kinsa

Toca el engranaje de ajuste  en la esquina superior derecha de tu pantalla, y toca la opción **Agregar nuevo termómetro**.

Siga las instrucciones en la pantalla para conectar su termómetro via  Bluetooth.